


## [キャップ式フィルターの外し方]


本体からイヤープースを外します。

イヤープース、キャップ式フィルターは小さなお子様の手の届くところにはおかないください。

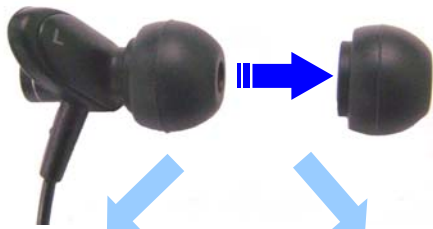


\* イヤープースを取り外す際にキャップ式フィルターが本体に残ることがあります。

### A) イヤープースにキャップ式フィルターが残った場合

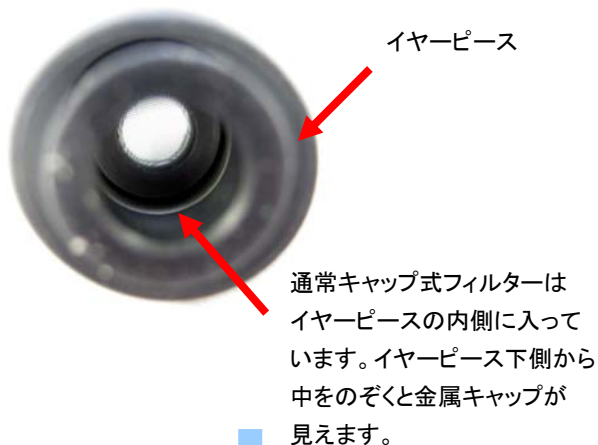

イヤープースを机の上に置き、イヤープース上部の端を指で押しつぶし、中に入っているキャップ式フィルターを、イヤープース内で縦にします。

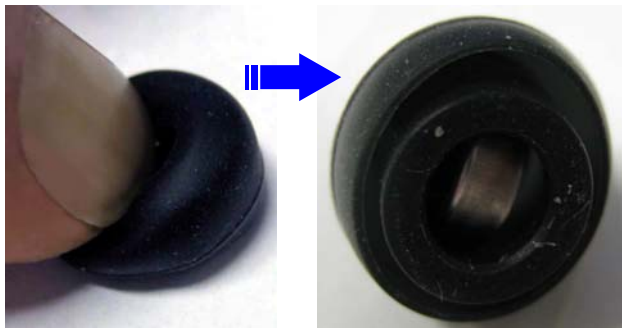

イヤープース上部の端を押し

イヤープースの中でキャップ式フィルターを縦にする

イヤープースを押しつぶし、キャップ式フィルターを押し出します。



外したキャップ式フィルターは捨ててください。


### B) 本体にキャップ式フィルターが残った場合



キャップ式フィルターが取り付けられた状態

不織布が外れたキャップ式フィルターが取り付けられた状態

キャップ式フィルターを取り外します。

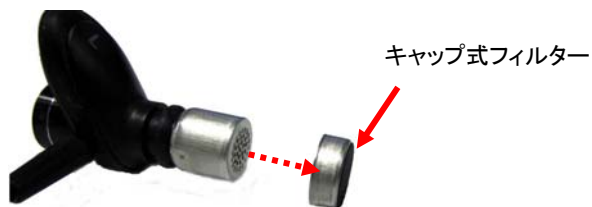

外したキャップ式フィルターは、捨ててください。

キャップ式フィルターが外された状態。



\* 製造時期によりキャップ式フィルターのない製品は、初めからこの状態です。

イヤープースを本体に取り付けます。